**REF**3012  
3020  
3030**SWL: 150 kg/330 lbs**

FlexiMove se utiliza como ayuda en el traslado y la recolocación en distintas situaciones. Entre las situaciones habituales en que se emplea están los traslados, los alzamientos y la recolocación hacia arriba en la cama. El FlexiMove incorpora dos longitudes de asas para garantizar una adecuada postura de trabajo al asistente. Dos materiales en el interior: nailon y poliéster. El nailon es un material antideslizante con una superficie fácil de desinfectar y el poliéster es suave y cómodo.




## Inspección operacional

### Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

### Prueba de fuerza

Haga fuerza sobre las hebillas y las asas y compruebe que soportan cargas pesadas.

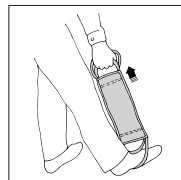

## Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.

Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.

Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.

Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: [www.handicare.com](http://www.handicare.com).

## Uso del FlexiMove




### Traslado:

Para los traslados, por ejemplo, entre una silla de ruedas y la cama, deberá usar también un EasyGlide y, en algunos casos, incluso un EasyBelt/FlexiBelt.

### Alzamiento:

En los alzamientos, el FlexiMove puede utilizarse para mover las piernas del usuario sobre el lado de la cama y luego como apoyo por detrás de la espalda/halgas.


Si el usuario precisa de la ayuda de dos asistentes, uno puede encargarse de las piernas y el otro del tronco. Durante el alzamiento propiamente dicho, los asistentes deben situarse a sendos lados del usuario y escoger las asas más apropiadas para una óptima postura de trabajo.

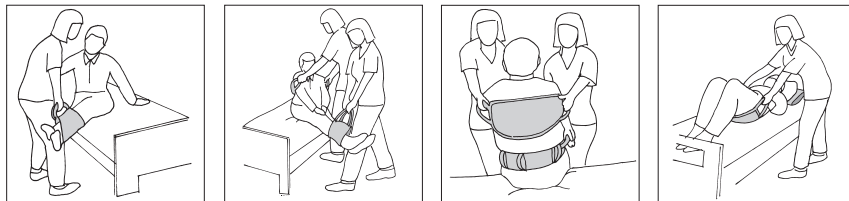

### Recolocación hacia arriba en la cama:

El FlexiMove se posiciona bajo las nalgas para resituar al usuario arriba en la cama.

Asimismo puede resultar aconsejable el uso de un dispositivo reductor de la fricción por debajo de los hombros, como, por ejemplo, un EasySlide.

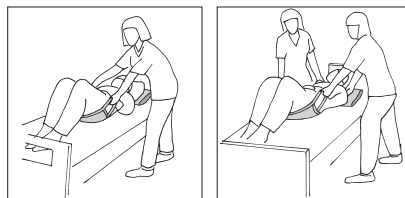

### Material

Poliamida, nailon/poliéster

### Cuidado del producto

Consulte la etiqueta del producto.



No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

**CE** Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite [www.handicare.com](http://www.handicare.com) para una lista completa de distribuidores.

### Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

## Product information

---

<b>Art. no</b>	<b>Productname</b>	<b>Size</b>	<b>Description</b>
3012	FlexiMove	200 x 600 mm, 7.8 x 23.6 "	Nylon, 4 handles
3020	FlexiMove	200 x 500 mm, 7.8 x 19.6 "	Polyester, velvet, 4 handles
3030	FlexiMove	200 x 600 mm, 7.8 x 23.6 "	Polyester, velvet, 4 handles

## Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

## Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

## Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; [www.handicare.com](http://www.handicare.com).

## For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; [www.handicare.com](http://www.handicare.com).

***Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.***

*The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.*



**MediCauce**

MediCauce Soluciones Sanitarias SL  
C/ Rio Jarama 132, 10-13  
45007, Toledo. España  
T- (+34) 925 337 467  
[www.medicauce.com](http://www.medicauce.com)  
[info@medicauce.com](mailto:info@medicauce.com)